

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ เรสโปแคร์ หน้ากาก N95

ข้อบ่งใช้


หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัสได้ 99.99% ช่วยลดการสัมผัส หรือติดเชื้อ จากสารคัดหลั่ง และอนุภาคขนาดเล็กได้ ระบายอากาศได้ดี และสวมใส่สบายตลอดวัน

คำแนะนำการใช้

เรสโปแคร์ หน้ากาก N95 เป็นหน้ากากที่ใช้แล้วทิ้ง สวมหน้ากากปิดทั้งจมูกและปาก เพื่อป้องกัน เชื้อจุลินทรีย์, สารคัดหลั่ง และอนุภาคขนาดเล็กได้ เพื่อความสะดวก ควรล้างมือก่อนสวมใส่หน้ากาก และ หลังการทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้ว หลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์ควรวางทิ้งไว้สักครู่ประมาณ 1-2 นาที ก่อนสวม หน้ากาก เพื่อระบายกลิ่นของยาออก



1. เปิดหน้ากาก N95 โดยการดึงลวดโลหะบริเวณจมูกออกไปด้านนอกทั้งสองด้าน

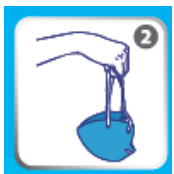


2. ถือหน้ากาก N95 ด้วยสายรัดทั้งสองข้างด้วยมือข้างเดียว เหมือนตะกร้า และ หันด้านที่มีลวดโลหะไปทางด้านนอก



3. สวมหน้ากาก N95 บริเวณดวง และดึงสายรัดเหนือศีรษะ



4. ปรับลวดโลหะให้กระชับ และเข้ารูปของใบหน้าผู้สวมใส่

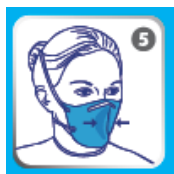

5. ทดสอบความกระชับของหน้ากาก : หน้ากากควรหดรัดตัว เมื่อหายใจเข้า และไม่ มีการรั่วไหลของอากาศเมื่อหายใจออก

คำเตือน

หน้ากากอนามัยไม่ได้ช่วยขจัดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการติดเชื้อใดๆ

ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออกหรือชำรุดเสียหาย หรือผู้มีประวัติไวต่อการแพ้ง่ายหรือ
สังกะสี

ห้ามใช้ซ้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

ห้ามกิน หรือกำจัดโซเดียมคาร์บอเนต และซองสารดูดความชื้น

เปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ หากพบความเสียหายหรือเปื้อน

หน้ากากปราศจากส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ

ใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

ควรทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด หรือตามข้อกำหนดของที่พักรักษา

ไม่ปราศจากเชื้อ

ควรเก็บในที่เย็นและแห้ง

ข้อห้ามใช้ และ ข้อควรระวัง

ไม่มี

ผู้นำเข้า

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G/2, ชั้น1-
2 อาคารเลขที่ 10/11 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โทร 02-758-8873

วิธีการเก็บรักษา

เก็บในที่เย็น และแห้ง

วันที่อัปเดตเอกสาร 29 ธันวาคม 2564