



flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

HIGH FLOW NASAL CANNULA



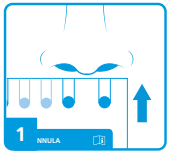

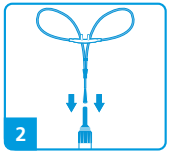

Instructions for use

1. Before opening the packaging, hold the sizing guide (above) up to the nostrils to select the appropriate nasal cannula size for the patient. Caution: The cannula prongs should not completely seal the nares. If this occurs, select a smaller size.
2. Set up the breathing circuit following the manufacturer's instructions for use and attach the high flow nasal cannula to the breathing circuit limb.
3. Set the oxygen concentration and adjust the flow rate to the recommended value stated on the product labelling.
4. Ensure there is gas flow through the nasal prongs and there are no blockages/leakages in the system. Allow the gas to become warm and humidified before connecting to the patient.
5. Position the nasal prongs in the patient's nostrils and pass the tubing over the ears and under the chin. Move the sliding collar towards the chin to secure the nasal cannula.
6. Check regularly to ensure the tubing is not twisted or kinked and gas is flowing freely.

Instructions for use

- After use, dispose of in accordance with local policies and / or as advised by your local healthcare provider.
- Do not reuse this device. Reuse may result in hazards such as, but not limited to; cross contamination, damage to device and/or suboptimal performance.
- Inspect device/packaging before use. Do not use if it appears damaged.
- Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the user and/or patient.

	PREMATURE	NEONATE	INFANT	INTERMEDIATE INFANT	PAEDIATRIC SMALL	PAEDIATRIC/ ADULT SMALL	ADULT
Max Flow (L/min)	≤8	≤8	≤8	≤8	≤20	≤40	≤40

135mm

Symbol Glossary

REF — *Catalog Number*
LOT — Batch Code
Use-by Date
MADE IN: — Country of Origin
CE 1639 — Product conforms with Directive 93/42/EEC
Do not re-use
Consult instructions for use
NON STERILE — Non-sterile
MD — *Medical device*
Do Not Use If Packaging Is Damaged
PHT DEHP — Product is not made with Phthalate DEHP
LATEX — Product is not made with natural rubber latex
Do not use blade to open
Keep Dry
Keep away from sunlight
Recycle
Manufactured by
Importer
EC REP — Authorized representative in the European Community / European Union

Flexicare Medical Limited Cynon Valley Business Park, Mountain Ash, CF45 4ER, UK
+44 (0)1443 474647 +44 (0)1443 474222 enquiries@flexicare.com


EC REP **Flexicare Deutschland GmbH** Ohlenhohnstrasse 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germany.


IP0000-069/2
022022

125mm

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE
CE 1639

PRESSURE RELIEF VALVE

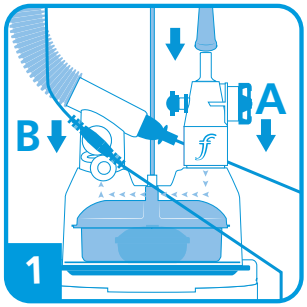

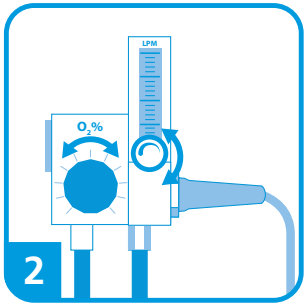

Instructions for use

1. A - Position the pressure relief valve on to the humidification chamber port and connect the oxygen blender tubing.
   B - Connect the angled connector of the inspiratory limb to the other port of the humidification chamber. Set up the breathing circuit, humidification chamber and respiratory humidifier following the manufacturer's instructions.
2. Set the oxygen concentration and adjust the flow rate to the recommended value stated on the product labelling. Ensure there is gas flow through the set up and there are no blockages in the system.
3. After use, turn off the oxygen blender and humidifier, then disconnect the breathing circuit and pressure relief valve and dispose of in accordance with local policies and / or as advised by your local healthcare provider.

Do not reuse this device. Reuse may result in hazards such as, but not limited to; cross contamination, damage to device and/or suboptimal performance.


Symbol Glossary


REF Catalogue Number	LOT Batch Code	Use-by Date	Date of manufacture	CE 1639 Product conforms with Directive 93/42/EEC	Do not re-use
Consult instructions for use	NON STERILE Non-sterile	Do Not Use If Packaging Is Damaged	NO DEHP Product is not made with Phthalate DEHP	LATEX Product is not made with natural rubber latex	Do not use blade to open
Keep Dry	Keep away from sunlight	Recycle	Manufactured by		


Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the user and/or patient.


Flexicare Medical Limited Cynon Valley Business Park, Mountain Ash, CF45 4ER, UK
+44 (0)1443 474647 +44 (0)1443 474222 enquiries@flexicare.com


IP0000-087/1 | 022020

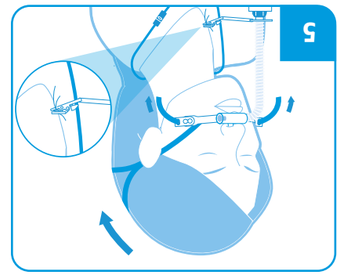


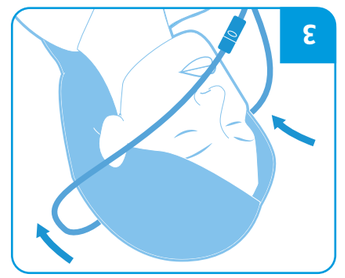

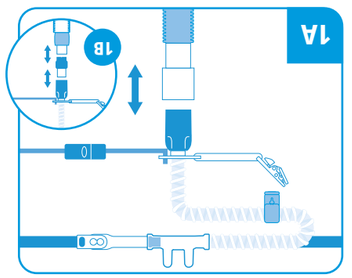

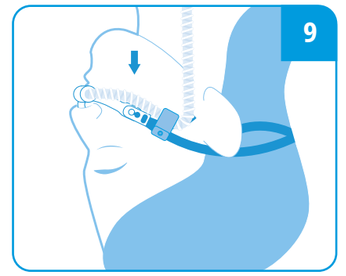

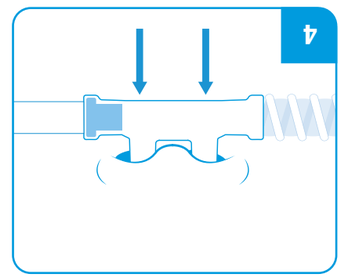

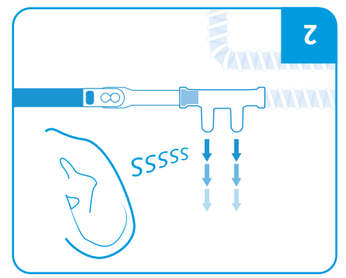

EN - HIGH FLOW NASAL CANNULA

Intended Use
Veoflo® is a high flow Nasal Cannula intended for use with a breathing system during high flow Oxygen Therapy to deliver heated and humidified gas, providing respiratory support to spontaneously breathing adult patients in the hospital.

Precautions
- Do not use if packaging is open, or if packaging or contents are damaged.
- Ensure that the Veoflo® High Flow Nasal Cannula is compatible with the breathing system. Before use, visually inspect all connections to confirm they are firmly secured and ensure there is no occlusion or leakage in the system.
- Check for gas flow from the nasal prongs before fitting the Veoflo® High Flow Nasal Cannula to the patient.
- Make sure the lanyard is fitted appropriately in order to ensure the loading of the Veoflo® High Flow Nasal Cannula is kept to a minimum.
- The lanyard is not suitable for use on patients with damaged skin.
- To prevent blockage of secretions in the patients airway, set the gas flow higher than the patient's peak inspiratory flow; this will maximise oxygen and humidity delivery.
- Check that the prongs do not completely seal the nares. If this occurs, select a smaller cannula size.
- Check regularly to ensure there are no twists in the system and gas is flowing freely.
- Check regularly for condensate in the breathing system. Drain if required.

Warnings / Cautions
- High Flow Oxygen Therapy can generate positive airway pressures. Use with care in patients where CPAP is contraindicated.
- Veoflo® High flow Nasal Cannula is single use only and intended for use up to a maximum period of 7 days.
- Always refer to manufacturers' instructions for use for all associated equipment.
- This product is single use and must not be reprocessed. This includes rinsing, washing or decontamination using gas, heat, steam, or boiling water.
- Do not use this device. Reuse may result in hazards such as, but not limited to: cross contamination, damage to device and/or suboptimal performance.
- After use, dispose of in accordance with local policies and / or as advised by your local healthcare provider.

Instructions for Use
1A. If using a Flexicare circuit, connect the cannula and connector to the heated wire breathing system; ensuring a secure fit.

1B. If required, use the Veoflo® Adapter. Slide the cannula and connector into the ridged end of the Veoflo® Adapter, then connect the smooth end of the adapter to the heated wire breathing system, ensuring a secure fit.

2. Turn on the gas supply and the heater humidifier, following the equipment manufacturers' instructions.

3. Pass the lanyard over the patient's head.

4. Place the dual elastic strap around the patient's head, positioning the nasal prongs into the nostrils. Check that the prongs do not completely seal the nares. If this occurs, select a smaller cannula size.

5. Adjust the head strap to secure Veoflo® in position. Use the clip to secure the tubing to the patient's gown to maintain the position of the system.

6. Slide the tube holder to the desired position and secure to the elastic band to avoid drag on the nasal cannula.

Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the user and/or patient.

CS - VYSOKOPRŮTOKOVÁ NOSNÍ KANYLA

Účel použití
Veoflo® je vysokoprůtoková nosní kanyla určená k použití s dýchacím systémem při vysokých hodnotách průtoku okysličovadla (HFNT) ve ohřívané a zvlhčené dodávání okysličovadla pro ulehčení spontánního dýchání u dospělých pacientů.

Bezpečnostní opatření
- Nikdy nepoužívejte obal, který je poškozený nebo pokud je obal či jeho obsah poškozený.
- Zajistěte, aby byla vysokoprůtoková nosní kanyla Veoflo® kompatibilní s dýchacím systémem.
- Před použitím vizuálně zkontrolujte všechny spojky a ověřte, že jsou pevně zajištěné a že vzduch ze systému nejsou žádná netěsnosti místa.
- Před nasazením vysokoprůtokové nosní kanyly Veoflo® do nosu pacienta zkontrolujte průchodnost nosních dírek.
- Zajistěte, aby byla kanyla správně umístěná, tak aby byla vysokoprůtokové nosní kanyla udržována co nejvíce v rovině.
- Pokud se u pacienta objeví podráždění pokožky, přestaňte používat vysokoprůtokové nosní kanyly Veoflo® a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zajistěte, aby byla kanyla správně umístěná, tak aby byla vysokoprůtokové nosní kanyla Veoflo® pohodlně a bezpečně.
- Pacienti by měli být sledováni, aby se ujistili, že jsou dostatečně hydratováni

420mm

JA - 高流量鼻腔カニューラ

用途
Veoflo® 高流量鼻腔カニューラは、加温・加湿されたガスを供給する高流量酸素療法においてブリージングシステムと併用され、自発呼吸患者の呼吸を助けます。

注意事項
- パッケージが開いていた場合、もしくはパッケージや内容物が破損されていた場合は使用しないでください。
- Veoflo® 高流量鼻腔カニューラがお使いのブリージングシステムで使えることをお確かめください。
- ご使用前に、すべての接続部分がしっかりと接続されていることを目視確認するとともに、システム内に閉塞や漏れがないことを確認してください。
- 患者にVeoflo® 高流量鼻腔カニューラを装着する前に、鼻腔プロングからガスが流れていることを確認してください。
- Veoflo® 高流量鼻腔カニューラに過度な負荷をかけないよう、首ひもを適切に装着してください。
- 首ひもの使用は、皮膚に損傷のある患者には適していません。
- 患者の気道粘液分泌機能の低下を防ぐため、ガスの流量を患者のピーク吸気流量より高く設定してください。これにより、酸素と湿分の供給を最大限にすることができます。
- 鼻孔プロングが鼻孔を完全に塞いでいないか確認してください。完全に塞いでいるようであれば、より小さいサイズのカニューラと交換してください。
- システム各部に捻れやキンクがなく、ガスが問題なく流れていることを定期的に確認してください。
- ブリージングシステム内の結露を定期的にチェックし、必要があれば結露を除去してください。

警告
- 高流量酸素療法により気道内が陽圧になることがあります。持続的気道陽圧法が禁忌となっている患者の場合は、注意して使用してください。
- Veoflo® 高流量鼻腔カニューラは単回使用器具であり、最長7日間までの使用が想定されています。
- 関連機器使用の際には、必ず該当機器メーカーの使用説明書をお読みください。
- 当製品は単回使用製品です。再処理はしないでください。再処理には、すすぎ、洗浄、ガス・熱・滅菌水を使った汚染除去などが含まれます。
- この機器を再利用しないでください。再利用すると、これに限定されるものではありませんが、交差汚染、機器への損傷および/または性能の低下といった危険を招きます
- 現地の規制、および/または現地の医療機関の助言に従い廃棄します。

使用法
1A. Flexicare製の回路を使用する場合は、カニューラの末端部コネクターを加温ワイヤーブリージングシステムにしっかりと接続してください。
1B. 必要があれば、Veoflo® アダプターを使用してください。カニューラ末端部コネクターを Veoflo® アダプターのうえ状の末端部内にスライドさせ、アダプターの平らな末端部を加温ワイヤーブリージングシステムにしっかりと接続します。
機器メーカーの取扱説明書に従ってガスと加温加湿器のスイッチを入れてください。
2. ガスが流れていることを確認し、ガスが加温・加湿されてから患者に接続してください。
3. 首ひもを患者の頭から通してください。
4. デュアル伸縮ストラップを患者の頭部にかけ、鼻孔に鼻腔プロングを装着してください。その際、プロングが鼻孔を完全に塞いでいないことを確認してください。完全に塞いでいるようであれば、より小さいサイズのカニューラと交換してください。
5. Veoflo® がしっかりと固定されるようにヘッドストラップを調整してください。器具の位置がずれないように、クリップを使ってチューブを患者の衣服にしっかりと留めてください。
6. チューブホルダーを最適な場所にスライドさせ、カニューラが引っ張られないように伸縮バンドに固定してください。

本機器に関して発生した重大なインシデントは、製造元およびユーザーおよび/または患者の主管国の当局に報告する必要があります。

KO - 고유량 비강 캐뉼라

사용 목적
Veoflo®는 고유량 산소 치료 시 열 가습 가스를 전달하고 자발 호흡 환자의 호흡기 지원하면서 호흡 시스템과 함께 사용하도록 만들어진 목적의 고유량 비강 캐뉼라입니다.

예방 조치
- 포장이 뜯어져 있거나 포장 또는 내용물이 손상되어 있으면 사용하지 마십시오
- Veoflo® 고유량 비강 캐뉼라가 호흡 시스템과 호환되는지 반드시 확인하십시오.
- 사용 전 시스템 내 폐색 또는 누출이 없도록 모든 연결 부위가 안전하게 고정되어 있는지 육안 검사하십시오.
- Veoflo® 고유량 비강 캐뉼라를 환자에게 삽입하기 전에 비관으로부터의 가스 유량을 확인하십시오.
- Veoflo® 고유량 비강 캐뉼라의 로딩이 최소로 유지되도록 랜야드를 적절하게 꽂습니다.
- 랜야드는 상처 난 피부에는 사용하기 적절하지 않습니다.
- 환자의 기도에 분비물 건조를 막기 위해 환자의 들숨 유량보다 기체 유량을 높게 설정한다. 이는 산소 및 습도 전달을 최대화 해줍니다.
- 비관이 코안을 완전히 막지 않도록 확인합니다. 막힐 시, 작은 사이즈의 캐뉼라를 사용하시기 바랍니다.
- 시스템 내 비틀어짐이나 엉킨 게 없는지 주기적으로 확인하고 기체가 막힘 없이 잘 흐르는지 확인합니다.
- 호흡 시스템에 응축액이 있는지 주기적으로 확인합니다. 필요 시 비워줍니다.

주의 / 경고
- 고유량 산소 치료는 양압을 생성할 수 있습니다. CPAP 사용을 금하는 환자에게는 특별히 주의해 사용하십시오.
- Veoflo® 고유량 비강 캐뉼라는 일회용이고 최대 7일까지 사용할 수 있습니다.
- 관련 장비 사용방법은 제조사 사용법을 항상 참고하시기 바랍니다.
- 본 제품은 일회용이며 재사용되어서는 안 됩니다. 이는 가스, 열, 스팀 또는 끓는 물을 이용한 세척, 세탁, 제독을 포함합니다.
- 이 장치를 재사용하지 마십시오. 재사용하면 교차 오염, 장치 손상 및/또는 성능 저하 등과 같은 위험이 발생할 수 있습니다.
- 사용 후 현지 방침에 따라 및/또는 한지 의료 기관이 권고한 대로 폐기합니다.

사용법
1A. Flexicare circuit을 사용하면 캐뉼라 꼴 커넥터를 열선 호흡 시스템에 꽉 맞게 연결한다.
1B. 필요 시, Veoflo® 어댑터를 사용한다. 캐뉼라 꼴 커넥터를Veoflo® 어댑터의 돌출 부위에 밀어 넣은 후, 어댑터의 부드러운 꼴 쪽을 열선 호흡 시스템에 안 빡지도록 확실히 연결한다.
장비 제조업체 설명서를 따라 기체 공급 및 열 가습기를 켠다.
2. 기체 유량을 확인하고 기체가 따뜻하고 습도가 충분해진 후 환자에게 연결한다.
3. 랜야드를 환자 머리 위로 보낸다.
4. 이중 탄력 끈을 환자 머리 주변에 놓고, 비관을 콧구멍 안에 넣는다. 비관이 콧구멍을 위전히 막지 않도록 확인한다. 이가 발생 시, 작은 사이즈의 캐뉼라로 사용한다.
5. Veoflo®가 제 위치에 오도록 머리 끈을 조절한다. 시스템 위치를 유지하기 위해 클립을 이용해 튜브를 환자에 고정해준다.
6. 원하는 위치에 튜브 홀더를 밀어 넣어 비강 캐뉼라에서 드래그를 방지하기 위해 탄력 끈에 안전하게 고정해준다.

장치와 관련해 중대한 사건이 발생한다면 제조사 및 사용자/환자가 거주하는 국가의 관계 당국에게 보고해야 합니다.

PL - KANIULA NOSOWA WYSOKICH PRZEPŁYWÓW

Zamierzone Użycie
Veoflo® jest Kaniulą Nosową Wysokiego Przepływu zamierzoną do użytku z układem oddychania w czasie Terapii Wysokiego Przepływu Tlenu, wspomagającą spontanicznie oddychających pacjentów poprzez dostarczanie ogrzanego i nawilżonego gazu.

Środki Ostrożności
- Nie używaj, jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte bądź opakowanie lub jego zawartość są uszkodzone.
- Upewnij się, że Veoflo® Kaniula Nosowa Wysokiego Przepływu jest kompatybilna z układem oddechowym.
- Przed zastosowaniem sprawdź wizualnie wszystkie złącza w celu zapewnienia ich ścisłego przylegania oraz braku okluzji lub przecieku w układzie.
- Przed nałożeniem Veoflo® Kaniuli Nosowej Wysokiego Przepływu na pacjencie sprawdź przepływ gazu przez widełki nosowe.
- Upewnij się, że taśma jest właściwie umocowana, by zapewnić utrzymanie zaladunku Veoflo® Kaniuli Nosowej Wysokiego Przepływu na minimalnym poziomie.
- Taśma nie jest odpowiednia do użytku w przypadku pacjentów z uszkodzoną skórą.
- W celu uniknięcia wysychania wydzielin w przewodach oddechowych pacjenta ustaw przepływ gazu na poziomie wyższym niż najwyższy punkt przepływu wdechowego pacjenta; spowoduje to maksymalną dostawę tlenu i nawilżenia.
- Upewnij się, że widełki nie zamykają całkowicie nozdrzy. W takim wypadku należy wybrać mniejszą kaniulę.
- Sprawdzaj regularnie, by zapewnić brak skrętów albo zagięć w układzie jak również swobodny przepływ gazów.
- Sprawdzaj regularnie, czy w układzie oddychania nie ma kondensatu. W razie konieczności osusz.

Ostrzeżenia/ Uwagi
- Terapia Tlenowa Wysokiego Przepływu może powodować tworzenie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Używaj ostrożnie w przypadku pacjentów, u których CPAP jest przeciwskazane.
- Veoflo® Kaniula Nosowa Wysokiego Przepływu jest wyłącznie do jednorazowego użytku i zamierzona do użytku przez okres maksymalnie 7 dni.
- Przy Użyciu z innym powiązanym sprzętem zawsze odnieś się do instrukcji producenta.
- Ten produkt jest do jednorazowego użytku i nie należy go powtórnie przetwarzać. Dotyczy to płukania, mycia lub odkażania przy użyciu gazu, ciepła, pary czy wrzącej wody.
- Nie używać ponownie tego urządzenia. Ponowne użycie może prowadzić do takich zagrożeń jak m.in. zakażenie krzyżowe, uszkodzenie urządzenia i/lub pogorszenie jego działania.
- Po użyciu wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami i/lub instrukcją lekarza.

Instrukcja Obsługi
1A. Przy korzystaniu z układu Flexicare, przymocuj końcowe złącze kaniuli do podgrzewanego obwodu układu oddechowego, zapewniając ścisłe przyleganie.
1B. W razie konieczności użyj Veoflo® Adaptera. Wsuń końcowe złącze kaniuli do chropowatej końcówki Veoflo® Adaptera a następnie połącz gładką końcówkę adaptera do kpodgrzewanego obwodu układu oddechowego, zapewniając ścisłe przyleganie.
Włącz dopływ gazu oraz podgrzewany nawilżacz, przestrzegając instrukcji obsługi sprzętu producenta.
2. Sprawdź przepływ gazu i przed podłączeniem do pacjenta, poczekaj, aż gaz się podgrzeje i nawilży.
3. Przełóż taśmę przez głowę pacjenta.
4. Umieść podwójny elastyczny pasek wokół głowy pacjenta, umieszczając widełki nosowe w nozdrzach. Upewnij się, że widełki nie zamykają całkowicie nozdrzy. W takim wypadku należy wybrać mniejszy rozmiar kaniuli.
5. Dopasuj pasek wokół głowy tak, by zapewnić ścisłe przyleganie Veoflo® w odpowiednim miejscu. Użyj zaczepu, by przypiąć rurki do odzieży pacjenta i zapewnić utrzymanie układu w danej pozycji.
6. Wsuń uchwyt rurki do pożądanego położenia i przymocuj do elastycznego paska w celu uniknięcia oporu w działaniu kaniuli nosowej.

Wszelkie poważne zdarzenia związane z urządzeniem wymagają zgłoszenia producentowi oraz kompetentnemu organowi kraju członkowskiego użytkownika i/lub pacjenta.

PT - CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO

Utilização prevista
O Veoflo® é uma cânula nasal de alto fluxo destinada a ser usada em sistemas de respiração em tratamentos de alto fluxo de oxigénio, para fornecer gás aquecido e humidificado, proporcionando apoio a pacientes com respiração espontânea..

Precauções
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta, ou se a embalagem ou o seu conteúdo estiverem danificados.
- Assegurar que a cânula nasal de alto fluxo Veoflo® é compatível com o sistema de respiração.
- Antes de usar, fazer uma inspeção visual das ligações para confirmar que estão devidamente seguras e de que não há nenhuma oclusão ou fuga no sistema.
- Verificar o fluxo de gás nas cânulas nasais antes de prender a cânula nasal de alto fluxo Veoflo® ao paciente.
- Assegurar que o cordão está corretamente colocado para garantir o mínimo peso da cânula nasal de alto fluxo Veoflo®.
- O cordão não é adequado para pacientes com lesões na pele.
- Para evitar a secagem de secreções nas vias respiratórias do paciente, definir o fluxo de gás para um valor superior ao pico de inspiração do paciente; isto maximiza o fornecimento e a humidade do oxigénio.
- Garantir que as cânulas não tapam totalmente as narinas. Se tal acontecer, escolher cânulas mais pequenas.
- Confirmar regularmente que não há torções nem dobras no sistema e que o gás flui normalmente.
- Verificar regularmente se há condensação no sistema de respiração. Drenar, se necessário.

Advertências / Precauções
- A terapia de alto fluxo de oxigénio pode provocar pressões positivas de ar. Usar com cuidado em pacientes em que a CPAP seja contraindicada.
- A cânula nasal de alto fluxo Veoflo® é de utilização única e deve ser usada no máximo durante 7 dias.
- Consultar sempre as instruções de utilização de todos os equipamentos associados.
- Este produto é de utilização única e não deve ser reutilizado. Isto inclui enxaguar, lavar ou descontaminar com gás, calor, vapor ou água a ferver.
- Não reutilize o dispositivo. A reutilização pode causar perigos, tais como, por exemplo: contaminação cruzada, danos no dispositivo e/ou desempenho insuficiente.
- Após a utilização, elimine o produto em conformidade com as políticas locais e/ou de acordo com o recomendado pelo prestador de cuidados de saúde local.

Instruções de utilização
1A. Se for usado um circuito Flexicare, ligar a extremidade do conector da cânula ao lado do aquecimento do sistema de respiração, garantindo que fica bem seguro.
1B. Se necessário, usar o adaptador Veoflo®. Deslizar a extremidade do conector da cânula para dentro da terminação do adaptador Veoflo®, ligando depois o lado macio do adaptador ao lado do aquecimento do sistema de respiração, garantindo que fica bem seguro.
Ligar o fornecimento de gás e o aquecimento do humidificador, de acordo com as instruções do fabricante do equipamento.
2. Verificar o fluxo do gás e aguardar que o gás fique aquecido e humidificado antes de o ligar ao paciente.
3. Passar o cordão sobre a cabeça do paciente.
4. Passar a tira elástica dupla à volta da cabeça do paciente, inserindo as cânulas nasais nas narinas. Garantir que as cânulas não tapam totalmente as narinas. Se tal acontecer, escolher cânulas mais pequenas.
5. Ajustar a tira para manter o Veoflo® em posição. Usar a mola para prender a tubagem à roupa d paciente para manter o sistema em posição.
6. Deslizar o suporte do tubo para a posição desejada e prender com a tira de elástico para evitar que a cânula nasal se mexa.

Qualquer incidente grave que ocorra em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro do utilizador e/ou do doente.

RO - CANULA NAZALĂ CU FLUX RIDICAT

Utilizarea prevăzută
Veoflo® este o canulă nazală cu flux ridicat destinată utilizării cu un sistem de respirație în timpul Terapiei cu oxigen cu flux ridicat pentru a furniza gaz încălzit și umidificat, oferind suport respirator pentru pacienții cu respirație spontană.

Măsuri de precauție
- NU utilizați dacă ambalajul este deschis sau ambalajul sau conținutul acestuia sunt deteriorate.
- Asigurați-vă că canula nazală cu flux ridicat Veoflo® este compatibilă cu sistemul de respirație.
- Înainte de utilizare, inspectați vizual toate conexiunile pentru a confirma că acestea sunt bine fixate și asigurați-vă că nu există ocluzie sau scurgeri în sistem.
- Verificați fluxul de gaz de la preominențele nazale înainte de a monta canulei cu canula nazală cu flux ridicat Veoflo®.
- Asigurați-vă că șnurul este montat corespunzător, pentru a vă asigura că încărcarea Canulei nazale cu flux ridicat Veoflo® este menținută la valoarea minimă.
- Șnurul nu este potrivit pentru utilizarea la pacienții cu leziuni cutanate.
- Pentru a preveni uscarea secrețiilor din căile respiratorii ale pacientului, setați fluxul de gaz astfel încât să fie mai mare decât fluxul inspirator maxim pacientului; acest lucru va maximiza livrarea de oxigen și umiditate.
- Verificați dacă proeminențele nu sigilează complet nările. Dacă se întâmplă acest lucru, selectați o dimensiune mai mică a canulei.
- Verificați în mod regulat pentru a vă asigura că nu există răsuciri sau bucle în sistem și dacă gazul curge liber.
- Verificați regulat condensul din sistemul de respirație. Scurgeți dacă este necesar.

Avertismente / Precauții
- Terapia cu oxigen cu flux înalt poate genera presiuni pozitive în căile respiratorii. Utilizați cu atenție la pacienții pentru care la procedura CPAP este contraindicată.
- Canula nazală cu flux ridicat Veoflo® este de unică folosință și este destinată utilizării până la o perioadă maximă de 7 zile.
- Consultați întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru toate echipamentele asociate.
- Acest produs este de unică folosință și nu trebuie reutilizat. Ne referim aici la clătirea, spălarea sau decontaminarea folosind gaze, căldură, abur sau apă fiartă.
- Nu reutilizați acest dispozitiv. Reutilizarea poate duce la pericole care includ, dar nu se limitează la: contaminarăcina încrucișată, deteriorarea dispozitivului și/sau performanța suboptimă.
- După utilizare, a se elimina în conformitate cu politicile locale și/sau conform recomandării furnizorului de îngrijiri medicale local.

Instructions for Use
1A. Dacă utilizați un circuit Flexicare, conectați conectorul capătului canulei la sistemul de respirație cu fir încălzit, asigurând o fixare sigură.
1B. Dacă este necesar, utilizați adaptorul Veoflo®. Glisați conectorul capătului canulei în capătul crestat al adaptorului Veoflo®, apoi conectați capătul neted al adaptorului la sistemul de respirație cu fir încălzit, asigurând o fixare sigură.
Porniți alimentarea cu gaz și umidificatorul încălzitorului, respectând instrucțiunile producătorului echipamentului.
2. Confirmați debitul de gaz și lăsați gazul să se încălzească și să se umidifice înainte de conectarea la pacient.
3. Treceți șnurul peste capul pacientului.
4. Plasați banda elastică dublă în jurul capului pacientului, poziționând proeminențele nazale în nări. Verificați dacă proeminențele nu sigilează complet nările. Dacă se întâmplă acest lucru, selectați o dimensiune mai mică a canulei.
5. Reglați banda pe cap pentru a fixa Veoflo® în poziție. Utilizați clama pentru a fixa tubul de îmbrăcămintea pacientului pentru a menține sistemul în poziție.
6. Glisați suportul tubului în poziția dorită și fixați-l pe banda elastică pentru a evita tragerea canulei nazale.

Orice incident grav care apare în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru de reședință al utilizatorului și/sau pacientului.

RU - НОСОВАЯ КАНЮЛЯ ВЫСОКОГО ПОТОКА

Назначение
Veoflo® является носовой канюлей высокого потока для использования в комбинации с аппаратом ИВЛ во время оксигенотерапия высоким потоком в целях поставки подогретого и увлажненного газа, обеспечивая поддержку дыхательной системы нерегулярно дышащим пациентам.

Меры предосторожности
- Не пригодно к использованию, если упаковка открыта, если упаковка или ее содержимое повреждены.
- Убедитесь в том, что назальная канюля высокого потока Veoflo® совместима с аппаратом ИВЛ.
- До начала использования визуально осмотрите все соединения, чтобы предупредить закупорку и утечку в системе.
- Проверьте, есть ли поток газа из назальных канюль до установки назальной канюли высокого потока Veoflo® пациенту.
- Убедитесь в правильном пристегивании ремня для того, чтобы нагрузка на назальную канюлю высокого потока Veoflo® была минимальной.
- Ремень не подходит пациентам с поврежденной кожей.
- Во избежание засыханий выделений в дыхательном потоке пациента установите поток газа так, чтобы он был выше пика инспирационного потока пациента – это повысит до максимума поставку кислорода и уровень увлажненности.
- Проверьте, чтобы канюли не закрывали ноздри полностью. Если это происходит, возьмите канюлю размером меньше.
- Регулярно проверяйте, чтобы система не наклонялась и не перекручивалась, и что газ свободно протекает по ней.
- Регулярно проверяйте на наличие конденсата в аппарате ИВЛ, высушите его, если это необходимо.

Предостережения
- Оксигенотерапия высоким потоком может создать позитивное воздушное давление. Используйте с осторожностью на пациентах, кому противопоказано СИПАП.
- Назальная канюля высокого потока Veoflo® предназначена для одноразового использования максимум 7 дней.
- Всегда следуйте инструкциям производителя для использования любого сопутствующего оборудования.
- Этот продукт предназначен для одноразового использования и не должен использоваться повторно. Сюда входит полоскание, промывание или обеззараживание с использованием газа, подогрева, пара или кипящей воды.
- Запрещается применять аппарат повторно. Это может привести к неполадкам в его работе, в том числе к повторному загрязнению, повреждению и-или неэффективности.
- После окончании использования утилизировать в соответствии с правилами, действующими в данном медицинском учреждении, и-или указаниями региональной организации здравоохранения.

Instructions for Use
1A. При использовании системы Flexicare подключите коннектор канюли к подогретому аппарату ИВЛ, убедившись при этом в безопасности подсоединения.
1B. При необходимости, воспользуйтесь адаптером Veoflo®. Подсоедините коннектор канюли к выпуклой стороне адаптера Veoflo®, затем подсоедините гладкий конец адаптера к подогретому аппарату ИВЛ, убедившись в безопасности соединения.
Включите подачу газа и увлажнитель подогрева, следуя инструкции производителя.
2. Проверьте поток газа и дайте ему нагреться и увлажниться до подсоединения к пациенту.
3. Проденьте ремень через голову пациента.
4. Наденьте двойную эластичную ленту на голову пациента, вложив назальные канюли ему в ноздри. Убедитесь в том, что канюли не полностью закрывают ноздри. Если это так, возьмите канюлю размером меньше.
5. Затяните ленту на голове пациента так, чтобы закрепить Veoflo®. Воспользуйтесь зажимом для того, чтобы безопасно прикрепить трубку к пациенту для того, чтобы прикрепить к халату пациента установленную систему.
6. Отпустите штатив для пробирки в нужное положение и закрепите его эластичной лентой во избежание смещения назальной канюли.

Уведомлять изготовителя и компетентные ведомства страны потребителя и-или пациента о любых инцидентах, связанных с применением ингалятора.

ES - CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO

Uso previsto
Veoflo® es una cánula nasal de alto flujo diseñada parar usarla con un sistema respiratorio durante la oxigenoterapia de alto flujo, para suministrar gases humidificados y calientes, que ayuden en la respiración a pacientes que respiren de manera espontánea.

Recomendaciones
- No lo utilice si el envase está roto, o si los contenidos o el envase están dañados.
- Asegúrese de que la cánula nasal de alto flujo Veoflo® es compatible con el sistema respiratorio.
- Antes de usarlo, compruebe visualmente que todas las conexiones están bien fijadas y que el sistema no tiene fugas ni oclusiones.
- Compruebe que el gas fluye por las gafas nasales antes de colocarle la cánula nasal de alto flujo Veoflo® al paciente.
- Coloque el cordón de manera adecuada para mantener el peso de la cánula nasal de alto flujo Veoflo® al mínimo.
- No utilice el cordón con pacientes con lesiones cutáneas.
- Para evitar que las secreciones en las vías respiratorias del paciente se sequen, fije un flujo de gas mayor que el flujo de inspiración máximo del paciente; de esta manera se maximizan el suministro de oxígeno y humedad.
- Compruebe que las gafas nasales no tapan los orificios nasales por completo. Si se da el caso, escoja una cánula más pequeña.
- Compruebe regularmente que el gas fluye sin problemas y que el sistema no está retorcido ni enredado.
- Compruebe la condensación del sistema respiratorio regularmente. Séquelo si es necesario.

Advertencias/Precauciones
- La oxigenoterapia de alto flujo puede generar presión positiva en las vías respiratorias. Utilícese con cuidado en pacientes a los que no se les recomienda presión aérea positiva continua (PAPC).
- La cánula nasal de alto flujo Veoflo® es de un solo uso y está diseñada para un periodo máximo de 7 días.
- Siga las instrucciones de uso del fabricante para el instrumental relacionado.
- Este producto es de un solo uso y no debe reutilizarse. Tampoco debe aclararse, lavarse ni descontaminarse mediante gas, calor, vapor, o agua hirviendo.
- No reutilice este dispositivo. Su reutilización podría provocar riesgos que incluyen, pero no se limitan a, la contaminación cruzada, daños al dispositivo o un funcionamiento que podría no ser óptimo.
- Tras su uso, desechar según las políticas locales o según lo que recomiende su profesional sanitario local.

Instrucciones de uso
1A. Si usa un circuito Flexicare, conecte el conector final de la cánula al cable calentador del sistema respiratorio, y asegúrese de que está bien conectado.
1B. En caso necesario, utilice el adaptador Veoflo®. Deslice el conector final de la cánula en el extremo rugoso del adaptador Veoflo®, después, conecte el extremo liso del adaptador al cable calentador del sistema respiratorio, y asegúrese de que están bien conectados. Abra el suministro de gas y el humidificador del calentador según las instrucciones del fabricante del instrumental.
2. Una vez compruebe que el gas fluye, deje que se caliente y humedezca antes de conectarlo al paciente.
3. Pase el cordón por encima de la cabeza del paciente.
4. Coloque la banda elástica doble alrededor de la cabeza del paciente, con las gafas nasales en los orificios nasales. Compruebe que las gafas nasales no tapan los orificios nasales por completo. Si se da el caso, escoja una cánula más pequeña.
5. Ajuste la banda de la cabeza para sujetar Veoflo® en la posición correcta. Utilice la pinza para sujetar el tubo a la bata del paciente para que el sistema se mantenga en la posición adecuada.
6. Deslice el fijador del tubo hasta la posición deseada y fije la banda elástica para no arrastrar la cánula nasal.

Cualquier accidente grave que se produzca en relación con el uso de este dispositivo debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro del usuario o del paciente.

TR - YÜKSEK AKIŞLI NAZAL KANÜLÜ

Kullanım Amacı
Veoflo® spontan soluyan hastalara solunum desteği sağlamak üzere ısıtılmış ve nemlendirilmiş gaz iletmek için Yüksek Akışlı Oksijen Tedavisi sırasında bir solunum sistemiyle kullanılması amaçlanmış bir Yüksek Akışlı Nazal Kanülüdür.

Önlemler
- Ambalaj açıksa veya ambalaj veya içindekiler hasarlıysa kullanmayın.
- Veoflo® Yüksek Akışlı Nazal Kanülünün solunum sistemiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Kullanımdan önce sıkı olduklarından ve sistemde bir tıkanıklık veya kaçak olmadığından emin olmak için tüm bağlantıları görsel olarak inceleyin.
- Veoflo® Yüksek Akışlı Nazal Kanülünü hastaya yerleştirmeden önce nazal çıkıntılardan gaz akışını kontrol edin.
- Veoflo® Yüksek Akışlı Nazal Kanülünün yüklenmesinin minimum düzeyde tutulmasını sağlamak üzere ipin uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- İp, cildi hasarlı olan hastalarda kullanıma uygun değildir.
- Hastanın solunum yolunda sekresyonların kurumasını önlemek için gaz akışını hastanın tepe inspiratuar akışının üzerinde ayarlayın; bu işlem oksijen ve nem iletimini maksimuma çıkarır.
- Çıkıntıların burun deliklerini tamamen kapatmadığını kontrol edin. Bu durumda daha küçük bir kanül seçin.
- Sistemi herhangi bir kıvrılma veya bükülme olmaması ve gazın serbestçe akmasını sağlamak üzere düzenli olarak kontrol edin.
- Solunum sistemini kondensat açısından düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse boşaltın.

Uyarılar / Dikkat Edilecek Noktalar
- Yüksek Akışlı Oksijen Tedavisi pozitif solunum yolu basınçları oluşturabilir. CPAP işleminin kontrendike olduğu hastalarda dikkatli kullanın.
- Veoflo® Yüksek Akışlı Nazal Kanülü sadece tek kullanımlıktır ve maksimum 7 günlük bir dönem boyunca kullanılması amaçlanmıştır.
- Tüm ilgili ekipman için daima üreticinin Kullanma Talimatına başvurun.
- Bu ürün tek kullanımlıktır ve tekrar işlenmemelidir. Buna durulama, yıkama veya gaz, ısı, buhar veya kaynatılmış su kullanarak dekontaminasyon vardır.
- Bu cihazı tekrar kullanmayın. Tekrar kullanılması, bunlarla sınırlı olmamak üzere; çapraz kontaminasyon, cihaz hasarı ve/veya yetersiz performans gibi risklerle sonuçlanabilir.
- Kullanımdan sonra, yerel politikalara uygun olarak ve/veya yerel sağlık hizmeti sağlayıcınızın önerdiği şekilde atın.

Kullanma Talimatı
1A. Bir Flexicare devresi kullanılıyorsa, kanül uç konektörünü sıkıca oturacak şekilde ısıtmalı tel solunum sistemine takın.
1B. Gerekirse Veoflo® Adaptörünü kullanın. Kanül uç konektörünü Veoflo® Adaptörünün tırtıklı ucuna kaydırın ve sonra adaptörün düzgün ucunu solunum sisteminin ısıtmalı teline takıp sağlam oturduğundan emin olun.
Gaz besleme ve ısıtıcı nemlendiriciyi ekipman üreticisinin talimatını izleyerek açın.
2. Hastaya bağlamadan önce gaz akışını kontrol edin ve gazın ılık ve nemli olmasını bekleyin.
3. İpi hastanın başı üzerinden geçirin.
4. Çift elastik şeridi hastanın başı etrafına, nazal çıkıntıları burun delikleri içinde konumlandırarak yerleştirin. Çıkıntıların burun deliklerini tamamen kapatmadığını kontrol edin. Bu durumda daha küçük bir kanül seçin.
5. Veoflo® ürününü sabitlemek için kafa şeridini ayarlayın. Sistemin pozisyonunu korumak üzere boruyu hastanın önlüğüne sabitlemek için klipsi kullanın.
6. Boru tutucuyu istenen pozisyona kaydırın ve nazal kanülün çekilmesinden kaçınmak için elastik bandı sabitleyin.

Cihaz ile bağlantılı olarak meydana gelen ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın Üye Devletindeki yetkili makama bildirilmelidir.

	EN	CS	NL	FR	DE	EL	ID	IT	JA	KO	PL	PT	RO	RU	ES	TR
	CANNULA SIZE	VELIKOST KANYLY	AFMETING VAN DE CANULE	TAILLE DE CANULE	KANÜLENGRÖSSE	ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	UKURAN KANULA	DIMENSIONE DELLA CANNULA	カニューラのサイズ	캐뉼라 사이즈	ROZMIAR KANIULI	TAMANHO DA CÂNULA	DIMENSIUNEA CANULEI	РАЗМЕР КАНЮЛИ	TAMAÑO DE LA CÁNULA	KANÜL BÜYÜKLÜĞÜ
032-10-160 032-10-170	Small	Malá	Small	Petit	Small	Small	Kecil	Piccolo	小	소	Mały	Pequeno	Mică	Маленький	Pequeño	Küçük
032-10-161 032-10-171	Medium	Střední	Medium	Moyen	Medium	Medium	Sedang	Medio	中	중	Średni	Médio	Medie	Средний	Mediano	Orta
032-10-162 032-10-172	Large	Velká	Large	Grand	Large	Large	Besar	Grande	大	대	Duży	Grande	Mare	Большой	Grande	Büyük
	PRONG OD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR VÝSTUPKU	TAND (BUITENDIAMETER)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE L'EMBOUT	ÄUSSERER DURCHMESSER DES PRONGS	ΠΕΡΟΝΗ OD	DIAMETER LUAR PRONG	PRONG OD	プロング外径	PRONG OD	OD WIDEŁEK	CÂNULA OD	DIAM. EXT. PROEMINENȚĂ	ДИАМЕТР КАНЮЛЬ	DIÁMETRO EXTERIOR DE LAS GAFAS	ÇIKINTI DIŞ ÇAPI
032-10-160 032-10-170	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5 millimetri	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5 мм	5mm	5mm
032-10-161 032-10-171	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6 millimetri	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6 мм	6mm	6mm
032-10-162 032-10-172	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm	7 millimetri	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm	7 мм	7mm	7mm
	MAXIMUM FLOW RATE	MAXIMÁLNÍ PRŮTOK	MAXIMAAL DEBIET	DÉBIT MAXIMAL	MAXIMALE DURCHFLUSSRATE	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ	LAJU ALIRAN MAKSIMUM	PORTATA MASSIMA	最大流量	최대 유량	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU	CAUDAL MÁXIMO	DEBITUL MAXIM	МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОТОКА	FLUJO MÁXIMO	MAKSIMUM AKIŞ HIZI
032-10-160 032-10-170	<60 L/min	<60 L/min	<60 L/min	<60l/min	<60l/min	<60l/min	< 60 liter/menit	<60l/min	<60l/分	<60l/분	<60l/min	<60l/min	< 60 l/min	<60 л/мин	<60 l/min	<60 l/dk
032-10-161 032-10-171	<60 L/min	<60 L/min	<60 L/min	<60l/min	<60l/min	<60l/min	< 60 liter/menit	<60l/min	<60l/分	<60l/분	<60l/min	<60l/min	< 60 l/min	<60 л/мин	<60 l/min	<60 l/dk
032-10-162 032-10-172	<60 L/min	<60 L/min	<60 L/min	<60l/min	<60l/min	<60l/min	< 60 liter/menit	<60l/min	<60l/分	<60l/분	<60l/min	<60l/min	< 60 l/min	<60 л/мин	<60 l/min	<60 l/dk

297mm

PANTONE 2925 C

210mm

148mm

Intended Use

The Veoflo® High Flow Tracheostomy Interface is intended for use with a breathing system during High Flow Therapy to deliver heated and humidified gas, providing respiratory support to spontaneously breathing adult patients in the hospital.

Precautions

- Do not use if packaging is open, or if packaging or contents are damaged.
- Ensure that the Veoflo® High Flow Tracheostomy Interface is compatible with the breathing system.
- Before use, visually inspect all connections to confirm they are firmly secured and ensure there is no occlusion or leakage in the system.
- Check for gas flow from the Veoflo® High Flow Tracheostomy Interface before attaching to the patient.
- Make sure the lanyard is fitted appropriately in order to ensure the loading of the tracheostomy tube is kept to a minimum.
- The lanyard is not suitable for use on patients with damaged skin.
- The blue deflector of the Veoflo® High Flow Tracheostomy Interface is removable.
- To prevent drying of secretions in the patient's airway, set the gas flow higher than the patient's peak inspiratory flow; this will maximise oxygen and humidity delivery.
- Check regularly to ensure there are no twists or kinks in the system and gas is flowing freely.
- Check regularly for condensate in the breathing system. Drain if required.

Part Number	Flow Range	Ambient Range	Interface Length	Tracheostomy Tube Connection
032-10-165	12–50 L/min	18–28 °C	0.3 m	15 mm Female Conical Connector
032-10-175	12–50 L/min	18–28 °C	0.3 m	15 mm Female Conical Connector

Symbols Glossary



Flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

Flexicare Medical Limited
Cynon Valley Business Park,
Mountain Ash, CF45 4ER UK
+44 (0)1443 474647
+44 (0)1443 474222
enquiries@flexicare.com


www.flexicare.com

IP0000-067/2 | 052020

Flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

veoflo®

HIGH FLOW TRACHEOSTOMY INTERFACE

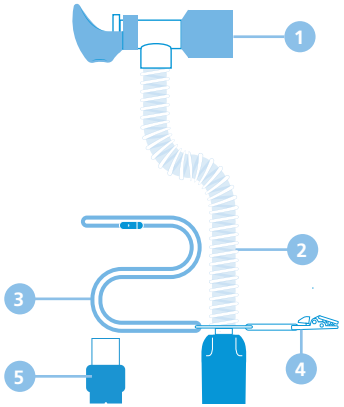

1. 15mm Female Conical Connector
2. Smooth Bore Tubing **3.** Lanyard **4.** Clip **5.** Veoflo® Adaptor




Warnings / Cautions


- The Veoflo® High Flow Tracheostomy Interface is single use only and intended for use up to a maximum period of 7 days.
- Always refer to manufacturers' Instructions for Use for all associated equipment.
- Do not reuse this device. Reuse may result in hazards such as, but not limited to; cross contamination, damage to device and/or suboptimal performance.
- This product is single use and must not be reprocessed. This includes rinsing, washing or decontamination using gas, heat, steam, or boiling water.
- Do not obstruct exhalation ports.
- Do not use with an oxygen / air entrainer.
- After use, dispose of in accordance with local policies and / or as advised by your local healthcare provider.

Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the user and/or patient.

Instructions for Use

1. Set up the breathing circuit, humidification chamber and respiratory heater humidifier following the manufacturers' instructions.
   - Place the lanyard around the patient's neck or tape to the shoulder to reduce tube drag.
2. Connect the bottom end of the tracheostomy interface to the breathing circuit, ensuring a secure fit.
3. Turn on the gas supply and respiratory heater humidifier, following the manufacturers' instructions.
4. Confirm gas flow and allow the gas to become warm and humidified before attaching the patient end of the tracheostomy interface to the tracheostomy tube.
5. Use the clip to secure the tubing to the patient's gown to support the weight of the system.

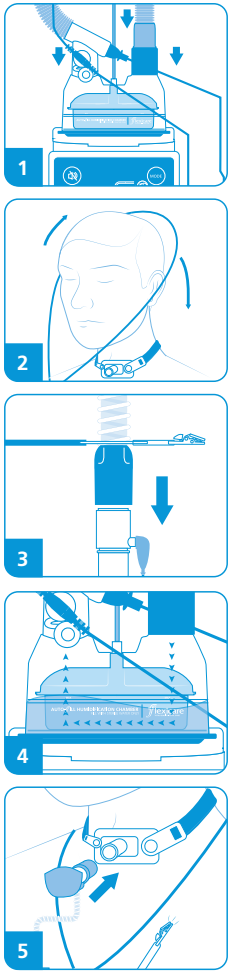

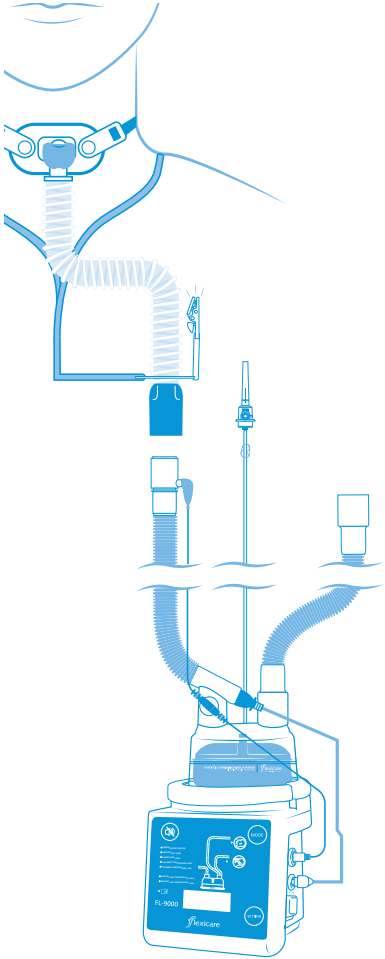

148mm


210mm


nioflo™

CE 1639

NASAL CANNULA

PT-BR	Cânula nasal	**FR**	Canule nasale	**KO**	비강 캐뉼라	**SR**	Nosna kanila
BG	Носна канюла	**EL**	Ρινικός καθετήρας	**LV**	Nazālā kanile	**ZH**	鼻氧管
HR	Nosna kanila	**DE**	Nasenbrille	**LT**	Nosies kaniulė	**SK**	Nosná kanyla
CS	Nosní kanyla	**HU**	Orrkanül	**NO**	Nesekanyle	**ES**	Cánula nasal
DA	Nasal kanyle	**ID**	Kanula Nasal	**PL**	Kaniula nosowa	**SV**	Näskanyl
NL	Neuscanule	**IT**	Cannula nasale	**PT**	Cânula nasal	**TR**	Burun Kanülü
ET	Ninakanüül	**JA**	鼻腔カニューラ	**RO**	Canulă nazală	**UK**	Носова канюля
FI	Nenäkanyyli	**KK**	Мұрын қуыс инесі	**RU**	Носовая канюля	**VI**	Canun mũi

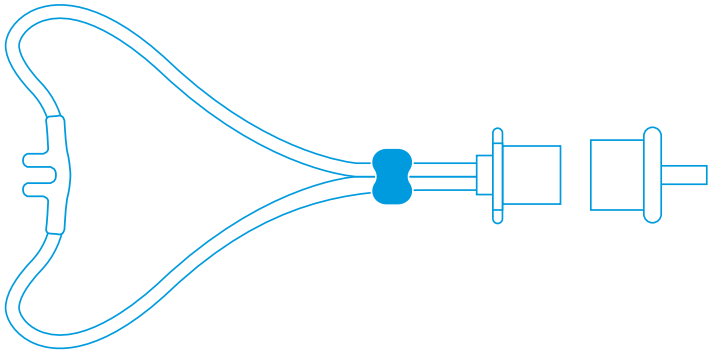

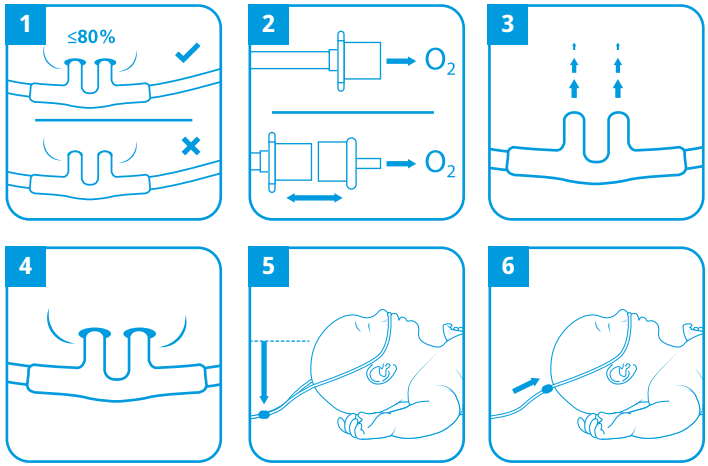

Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the user and/or patient.

INTENDED USE

NioFlo nasal cannula is intended for use for spontaneously breathing neonate/infant and paediatric patients in the hospital who require supplementary oxygen or respiratory support.

It is used to provide oxygen with the following methods:
1. Heated or unheated, humidified low flow oxygen therapy
2. Heated, humidified high flow oxygen therapy

PRECAUTIONS

- Do not use if packaging is open, or if packaging or contents are damaged.
- Ensure the correct setup is chosen. An optional oxygen tubing adapter is included.
- Before use, visually inspect all connections to confirm they are firmly secured and ensure there is no occlusion or leakage in the setup.
- Check for gas flow from the nasal prongs before fitting the NioFlo nasal cannula to the patient.
- Check that the prongs do not completely seal the nares. If this occurs, select a smaller cannula size.
- Check regularly to ensure there are no twists or kinks in the system and gas is flowing freely.
- Replace NioFlo nasal cannula every 14 days, or less if dictated by local policies and guidelines.

WARNINGS / CAUTIONS

- Always refer to manufacturers' Instructions for Use for all associated equipment.
- This product is single use and must not be reprocessed. This includes rinsing, washing or decontamination using gas, heat, steam, or boiling water.
- Do not reuse this device. Reuse may result in hazards such as, but not limited to; cross contamination, damage to device and/or sub-optimal performance.
- After use, this product is contaminated waste and may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with hospital policy and applicable local guidelines and regulations.
- Do not position the tubing underneath the patient's head.



MICRO PREMATURE
OD 2.2mm

PREMATURE
OD 2.2mm

NEONATAL
OD 3.5mm

INFANT
OD 4.0 mm

SMALL
OD 5.3 mm

MEDIUM
OD 5.7 mm

LARGE
OD 6.5 mm

Symbol Glossary



Catalogue number

Batch code

Use by date

Product conforms with Directive 93/42/EEC

Do not re-use

Consult instructions for use

Non-sterile

Do not use if packaging is damaged

Product is not made with Phthalate DEHP

Product is not made with natural rubber latex

Manufactured by

Do not use blade to open

Keep away from sunlight

Keep dry

Recycle

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

Flexicare Medical Limited
Cynon Valley Business Park,
Mountain Ash, CF45 4ER UK
+44 (0)1443 474647
+44 (0)1443 474222
enquiries@flexicare.com

www.flexicare.com

IP0000-058/1 | 032020